#### Лабораторная работа № 2.2.1

### Исследование взаимной диффузии газов

## 1 Аннотация

**Цель работы:** 1) регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов; 2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используются: измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

# 2 Теоретические сведения

Диффузией называют самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или концентрационной) диффузии. В системе, состоящей из двух компонентов а и b (бинарная смесь), плотности потоков частиц в результате взаимной диффузии определяются законом Фика:

$$j_a = -D\frac{\partial n_a}{\partial x}, j_b = -D\frac{\partial n_b}{\partial x},$$
 (1)

где D — коэффициент взаимной диффузии компонентов. Знак «минус» отражает тот факт, что диффузия идёт в направлении выравнивания концентраций. Равновесие достигается при равномерном распределении вещества по объёму.

В данной работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха. Отметим, что давление и температура в системе предполагаются неизменным:  $P_0 = (n_{He} + n_{\rm B})kT = const$ , где  $n_{He}$  и  $n_{\rm B}$  – концентрации диффундирующих газов. Поэтому для любых изменений концентраций справедливо  $\Delta n_{\rm B} = -\Delta n_{He}$ . Следовательно, достаточно ограничиться описанием диффузии одного из компонентов, например гелия.

Приведём теоретическую оценку для коэффициента диффузии. В работе концентрация гелия, как правило, мала  $(n_{He} \ll n_{\rm B})$ . Кроме того, атомы гелия легче молекул, составляющих воздух  $(m_{He} \ll m_{N_2}, m_{O_2})$ , значит их средняя тепловая скорость велика по сравнению с остальными частицами. Поэтому перемешивание газов в работе можно приближенно описывать как диффузию примеси лёгких частиц Не на практически стационарном фоне воздуха. Коэффициент диффузии в таком приближении равен

$$D = \frac{1}{3}\lambda \langle v \rangle,\tag{2}$$

где  $\lambda = \frac{1}{n\sigma}$  – длина свободного пробега диффундирующих частиц;  $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$  – их средняя тепловая скорость.

Предпологая, что процесс диффузии будет квазиостационарным, можно показать, что разность концентраций будет убывать по экспоненциальному закону

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau},\tag{3}$$

где au – характерное время выравнивания концентраций между сосудами, определяемое следующей формулой

$$\tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S}.\tag{4}$$

# 3 Используемое оборудование

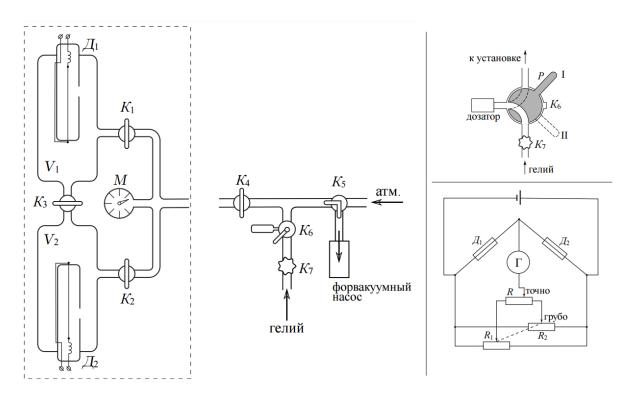


Рис. 1: Установка

Здесь  $V_1,\ V_2$  – два сосуда с примерно равным объемом, в которые мы будем загонять воздух и гелий.

Данная конструкция позволяет провести диффузию, которая возможна только при равенстве давлений.

Основное оборудование, с помощью которого мы будем снимать измерения – датчики теплопроводности, через которые пропускают ток. Они подключены к мосту, который позволяет нам устанавливать начальное равновесное состояние.

При изменении концентрации в колбах вольтметр покажет нам разность напряжений на датчиках, что, из-за их конструкции, означает разность концентраций.

С помощью изменения напряжения мы и будем изучать процесс диффузии, т.к. во время ее протекания концентрации газов начинают устанавливаться, что заметно на графике разницы напряжений от времени.

# 4 Результаты измерений и обработка данных

#### Параметры установки

$$V_1 \approx V_2 = 1200.0 \pm 3.0 \text{ cm}^3$$
 (5)

$$L/S = 5.5 \pm 0.5 \text{ cm}^{-1}$$
 (6)

$$T = 295.0 \pm 1.0 \ K \tag{7}$$

$$P = 745.70 \pm 0.10 \text{ Topp}$$
 (8)

#### Зависимость показаний вольтметра от времени

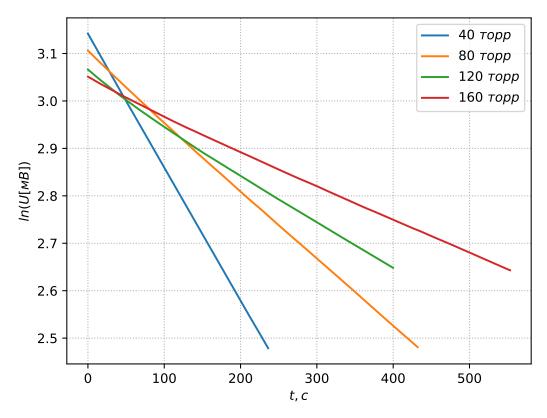


Рис. 2: Логарифмическая зависимость

Используя формулы (3) и (4), по угловым коэффициентам и известным геометрическим параметрам установки (5) и (6) рассчитаем коэффициенты взаимной диффузии при выбранных рабочих давлениях:

D, cm <sup>2</sup> · c <sup>-1</sup>	P, Topp
$9.3 \pm 0.8$	$40 \pm 4$
$4.7 \pm 0.4$	$80 \pm 4$
$3.38 \pm 0.31$	$120 \pm 4$
$2.39 \pm 0.22$	$160 \pm 4$

Таблица 1: Коэффициенты взаимной диффузии при выбранных рабочих давлениях

### Коэффициент диффузии

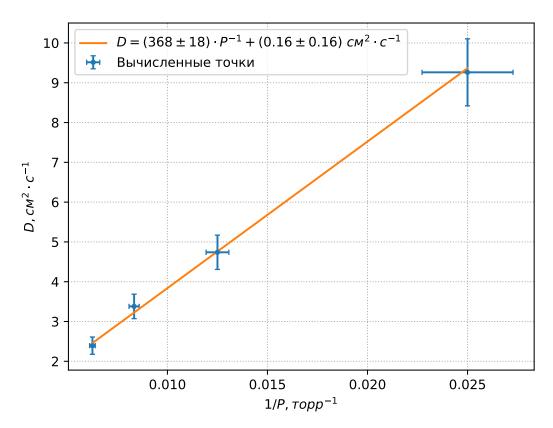


Рис. 3: Зависимость коэффициента диффузии от обратного давления

Экстраполируя график к атмосферному давлению (8):

$$D_{He-B}^{\text{atm}} = 0.65 \pm 0.16 \text{ cm}^2 \cdot \text{c}^{-1}$$
 (9)

### Длина свободного пробега и эффективное сечение

Оценим длину свободного пробега атомов гелия в воздухе по формуле (2):

$$\lambda_{He}^{\text{atm}} = (1.6 \pm 0.4) \times 10^2 \text{ HM}$$
 (10)

А также эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха:

$$\sigma_{He-B}^{\text{atm}} = 0.26 \pm 0.07 \text{ Hm}^2$$
 (11)

# 5 Обсуждение результатов

Из графика (рис. 2) видно, что процесс диффузии подчиняется закону (3).

Вычислен коэффициент диффузии при атмосферном двалении (9), значение которого хорошо согласуется с табличным:

$$D_{He-B}^{\text{табл}} = 0.620 \pm 0.010 \text{ cm}^2 \cdot \text{c}^{-1}$$
 (12)

Вычислены длина свободного пробега атомов гелия в воздухе (10), а также эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха (11). Значение последнего хорошо согласуется с теоретически вычисленным по порядку:

$$\sigma_{He-R}^{\text{Teop}} = \pi d_{He}^2 = 0.1385 \pm 0.0026 \text{ HM}^2$$
 (13)